

#### ОБСЛУЖИВАНИЕ:

1. Примите меры, чтобы избежать попадания влаги, мышей и загрязнений.
2. Не выключайте устройство, пока ручка не будет очищена.
3. После использования поместите продукт в безопасное место. Не кладите другие предметы на устройство

Если продукт вышел из строя, обратитесь за профессиональной технической помощью. Не разбирайте без получения разрешения компании.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность: 6 Вт

Аккумулятор: 3,7 В 2000 мАч

Температура: 5° ~ 40°С

Атмосферное давление: 860 гПа ~ 1060 гПа

Размеры устройства: длина 250 мм х ширина 140 мм х высота 130 мм

Вес нетто: 900 г

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Массажёр - 1шт.
2. USB-кабель для зарядки - 1шт
4. Инструкция - 1шт.



*Предлагаем Вашему вниманию серию массажёров для тела "Технологии Здоровья"*



Весь ассортимент продукции компании «Технологии здоровья» на сайте:

[www.tz66.ru](http://www.tz66.ru)

### СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 69  
Тел. +7 (343) 374-18-00

Уважаемый покупатель!

Компания «Технологии Здоровья» благодарит Вас за покупку массажера BM-NT070. Мы надеемся, что этот прибор подарит Вам массу положительных эмоций, а также сделает Вашу жизнь более комфортной. Массажер BM-NT070 предназначен для разминания мышц шеи, снимает стресс и усталость и поддерживает ваше здоровье, раскрывая эффективность традиционного китайского меридианного массажа. Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

#### ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА:

1. Массажные ролики
2. Переключатель режимов
3. Гнездо питания
4. USB-кабель для зарядки



#### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ:

1. Найдите порт зарядки в нижней части корпуса основного устройства.
2. Подключите USB-кабель для зарядки к разъему питания устройства.
3. Во время зарядки светодиод светится красным; при завершении зарядки светодиодный индикатор становится фиолетовым.
4. Устройство не может быть включено во время зарядки (продукт автоматически перестанет работать при подключении к сети в рабочем режиме для включения защиты).
5. Основное устройство питается от высокопроизводительной литиевой батареи.



#### ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА:

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 30 МИНУТ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР ВО ВРЕМЯ СНА И НЕ ЗАСЫПАЙТЕ ВО ВРЕМЯ МАССАЖА.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ ПРИ ЛЮБОМ НЕДОМОГАНИИ.

ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПЕРЕРЫВ 15 МИНУТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИБОР ОСТЫЛ.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не используйте массажную подушку при плохом самочувствии.
2. Выберите удобное положение тела, вам должно быть комфортно (неудобный массаж может навредить).
3. Беременным женщинам, детям и больным людям не рекомендуется использовать массажную подушку.
4. При серьёзных проблемах с позвоночником или после операций массаж может быть противопоказан, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
5. Если у вас длинные волосы, соберите их перед использованием массажера для шеи.
6. Включайте устройство только после того, как оно находится у вас на шее.
7. Используйте USB-кабель для зарядки, входящий в комплект поставки устройства, и обеспечьте электрическую безопасность.
8. Устройство запрещено использовать людям с покраснением шеи, инфекциями и синяками, а также людям, перенесшим операцию на шее.
9. Устройство запрещено использовать людям с высоким кровяным давлением и шизофренией.
10. Люди, чьи шейные суставы и меридианы прогреваются медленно, должны использовать продукт с осторожностью.


## ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Пуск: нажмите и удерживайте кнопку  : светодиодный индикатор станет фиолетовым.


Устройство включается.

Возьмитесь за ручку обеими руками, поместите массажную головку в область шейного позвонка, отрегулируйте соединение силикагелевого устройства и найдите удобное положение, соответствующее окружности вашей шеи.

Потяните за ручку обеими руками и отрегулируйте натяжение массажной головки.

Изменить направление: кратковременно нажмите кнопку  : светодиодный индикатор станет фиолетовым, и устройство изменит направление массажа.


Выключение: длительное нажатие кнопки  в рабочем режиме: светодиодный индикатор выключается, и устройство отключается.

Режим нагрева: продукт начинает нагреваться автоматически при включении питания; нажмите кнопку  : устройство включает или отключает функцию нагрева.


Таймер: устройство автоматически выключается через 20 минут. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы снова начать массаж.

Индикация низкого заряда батареи: мигающий красный светодиодный индикатор указывает


## ФУНКЦИИ АКУПУНКТУРНЫХ ТОЧЕК

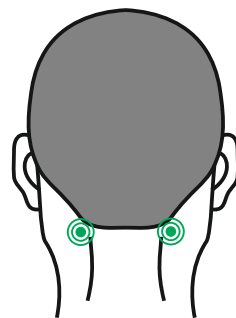

ТОЧКА ФЕН-ЧИ

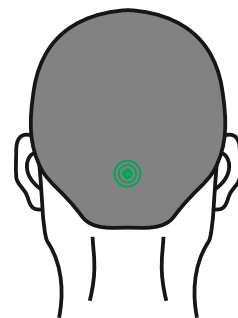

ТОЧКА ФЕН-ФУ

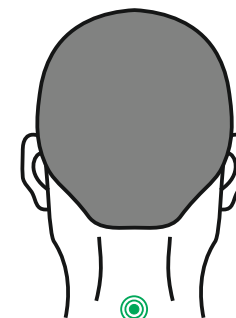

ТОЧКА ДА-ЧЖУЙ

## ХРАНЕНИЕ

1. Если срок хранения превышает 3 месяца, вам необходимо открыть упаковку, чтобы осмотреть устройство и подключить его к источнику питания.
2. Не ставьте устройство на землю, у стены или потолка.
3. Обеспечивайте вентиляцию помещения и избегайте попадания прямых солнечных лучей и агрессивных газов.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Этот продукт имеет устойчивость к вибрации и подходит для использования в самолетах, поездах, автомобилях и морском транспорте. Избегайте воздействия дождя, снега, подвешивания в перевернутом положении и ударов.

## ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Проверьте блок питания. Не запускайте устройство, если мощность и напряжение находятся вне предписанного диапазона.

## ГАРАНТИЯ:

Гарантийное обслуживание прибора - 6 месяцев с даты продажи при соблюдении правил эксплуатации. Компания оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках Закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством страны.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия действительна только при правильном и чётком заполнении гарантийного талона с указанием модели изделия, даты продажи, чёткими печатями фирмы-продавца. Компания оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если гарантийный талон не предоставлен или содержит неполную / неразборчивую информацию.
2. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
  - механические повреждения;
  - повреждения, вызванные попаданием внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т. д.;
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - дефекты, возникшие в результате отклонений от государственных технических стандартов параметров питающих сетей.
3. Настоящая гарантия не распространяется на детали отделки и прочие детали с ограниченным сроком использования, которые подлежат износу.
4. Гарантия не распространяется на товар, если недостатки в нём возникли вследствие нарушения потребителем правил эксплуатации или хранения, вследствие действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия	Вибромассажёр
Модель	ВМ-НТ070
Дата продажи	« ___ » _____ 20__ г.
Печать продавца:	

С правилами и условиями эффективной и безопасной эксплуатации прибора, а также с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.  
Комплектность и исправность прибора проверены в присутствии покупателя.

ФИО и подпись покупателя