

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не используйте массажёр при плохом самочувствии.
2. Выберите удобное положение тела, вам должно быть комфортно (неудобный массаж может навредить).
3. Не рекомендуется использовать массажёр беременным женщинам; людям, страдающим сердечными заболеваниями, высоким/низким давлением, сердечной или почечной недостаточностью; детям.
4. При серьёзных проблемах с позвоночником или после операций массаж может быть противопоказан, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Скорость вращения: ~3000 оборотов/мин.
 Напряжение: 220 В
 Мощность: 35 Вт
 Частота: 50 Гц

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Вибромассажёр - 1 шт.
2. Насадки – 4 шт.
3. Инструкция - 1 шт.

Предлагаем Вашему вниманию серию массажёров для тела «Технологии Здоровья»

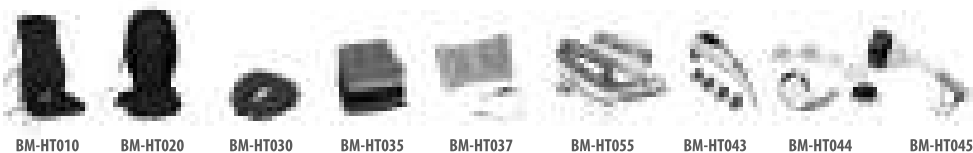

Весь ассортимент продукции компании «Технологии здоровья» на сайте:

www.tz66.ru

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 69
 Тел. +7 (343) 374-18-00


Уважаемый покупатель!

Компания «Технологии Здоровья» благодарит Вас за покупку вибромассажёра BM-HT043. Мы надеемся, что этот прибор подарит Вам массу положительных эмоций, а также сделает Вашу жизнь более комфортной. Прибор предназначен для массажа любых частей тела, кроме головы и лица.

Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА:

1. Массажёр
2. Инфракрасный излучатель
3. Индикаторы
4. Регулятор интенсивности вибрации
5. Переключатель функции инфракрасного излучения
6. Массажная головка
7. Насадки

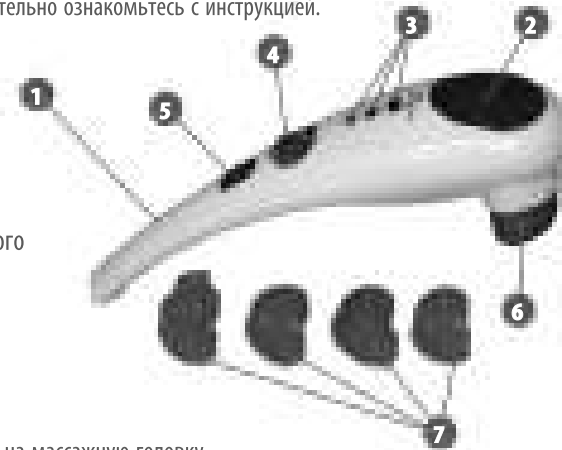

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Выберите нужную насадку и наденьте её на массажную головку.
2. Вставьте вилку прибора в розетку, загорится индикатор «POWER» (питание)(8).

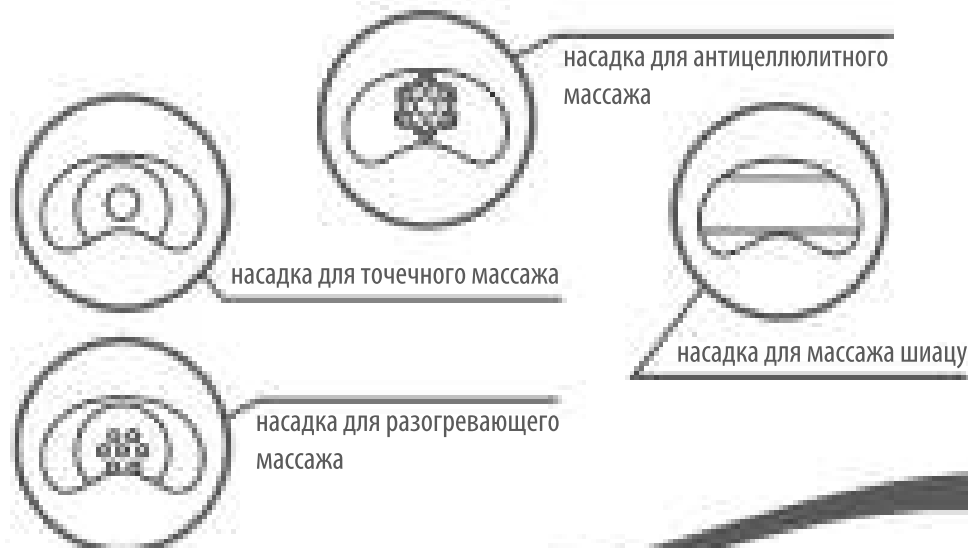

3. Поверните регулятор интенсивности по часовой стрелке. Вибромассажёр начнёт работать, загорится индикатор «MASSAGE» (массаж)(9). Приложите массажёр к нужному участку и приступайте к массажу.

4. Отрегулируйте интенсивность вибрации(10). Поворот регулятора по часовой стрелке увеличит интенсивность вибрации, против часовой стрелки — уменьшит.

5. Передвиньте переключатель функции инфракрасного излучения в положение «ON» (вкл.)(11), загорится индикатор «INFRARED» (инфракрасное излучение)(12). Приложите инфракрасный излучатель к нужному участку кожи. Инфракрасный прогрев очень полезен для мышц, с его помощью восстанавливается эластичность кожи, улучшается её внешний вид. Для выключения функции инфракрасного излучения передвиньте переключатель в положение «OFF» (выкл.).



ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА:

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 20 МИНУТ.

ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОДНУ ЧАСТЬ ТЕЛА - 5 МИНУТ.

МАССАЖ МОЖНО ПРОВОДИТЬ НА ЛЮБОЙ ЧАСТИ ТЕЛА КРОМЕ ГОЛОВЫ.

НАЧИНАЙТЕ МАССАЖ С НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ, ПОСТЕПЕННО УВЕЛИЧИВАЯ ЕЁ.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ МАССАЖЁР МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ЧАС ДО ЕДЫ, А ТАКЖЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ЕДЫ.

ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПЕРЕРЫВ 20 МИНУТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИБОР ОСТЫЛ.

6. По окончании процедуры массажа поверните регулятор интенсивности против часовой стрелки до щелчка для выключения прибора.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Нельзя эксплуатировать прибор при температуре окружающей среды выше 37°C.
2. Храните массажёр вдали от воды, не допускайте попадание на массажёр воды или другой жидкости. Не используйте прибор в ванной комнате, сауне, а также в местах с повышенной влажностью воздуха. Беречь от огня.
3. Не разбирайте массажёр самостоятельно. При возникновении неполадок обратитесь в сервисный центр.
4. Нельзя переносить прибор за сетевой шнур. При отключении из сети держитесь за вилку, а не тяните за шнур.
5. Пожалуйста, выключайте прибор из розетки после его эксплуатации, а также перед чисткой.
6. Храните массажёр в недоступном для детей месте.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийное обслуживание прибора - 6 месяцев с даты продажи при соблюдении правил эксплуатации. Компания оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках Закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством страны.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия действительна только при правильном и чётком заполнении гарантийного талона с указанием модели изделия, даты продажи, чёткими печатями фирмы-продавца. Компания оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если гарантийный талон не предоставлен или содержит неполную / неразборчивую информацию.
2. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные попаданием внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т. д.;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - дефекты, возникшие в результате отклонений от государственных технических стандартов параметров питающих сетей.
3. Настоящая гарантия не распространяется на детали отделки, элементы питания и прочие детали с ограниченным сроком использования, которые подлежат износу.
4. Гарантия не распространяется на товар, если недостатки в нём возникли вследствие нарушения потребителем правил эксплуатации или хранения, вследствие действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия	Вибромассажёр с функцией инфракрасного прогрева
Модель	BM-HT043
Дата продажи	«__» _____ 20__ г.
Печать продавца:	

С правилами и условиями эффективной и безопасной эксплуатации прибора, а также с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Комплектность и исправность прибора проверены в присутствии покупателя.

ФИО и подпись покупателя