

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Модели 210 D / 210 I с инфракрасным прогревом

Массажер

для НОГ, СТОП и ЛОДЫЖЕК

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения о приборе
- Показания к применению
- Противопоказания
- Меры безопасности
- Комплектация
- Основные правила использования прибора
- Возможные неисправности прибора и способы их устранения
- Гарантийные обязательства
- Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания: 220 В, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 40 Вт

Вес в упаковке: 7 кг

Продолжительность работы в автоматическом режиме: 15 мин.

Температура хранения: -15С ~ +80С

Рабочая температура: +10С ~ +40С

Материал: металл, пластик, текстиль

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Массажер для ног, стоп и лодыжек D&D 210 (D или I) – 1 шт.
2. Пульт дистанционного управления - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4. Коробка – 1 шт.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ

Принцип работы массажера для ног, стоп и лодыжек D&D основан на трехмерном воздействии встроенных валиков на биологически активные точки, находящиеся на стопе. Согласно представлениям традиционной китайской медицины, полноценное функционирование человеческого организма связано со здоровьем ног. Стимуляция точек, расположенных на стопе, позволяет снять напряжение, расслабиться и справиться со стрессами.

При создании массажера учитывалось строение человеческой стопы и расположение акупунктурных точек на ней.

Массажер осуществляет воздействие на обе стопы одновременно, что максимально расслабляет и одновременно обеспечивает положительное воздействие на организм.

Массажер предназначен для ежедневного использования в домашних условиях и является прекрасной альтернативой профессиональному массажу. Конструкция массажера позволяет осуществлять массаж без посторонней помощи и вы можете разминать стопы и лодыжки в любое удобное время.

Прибор имеет встроенные программы массажа в ручном и автоматическом режимах. Вы сможете выбрать установленную автоматическую программу или самостоятельно регулировать скорость и направление вращающихся пластин.

Во время использования массажера вы испытаете блаженство и приятные ощущения!

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАССАЖЕРА D&D 210:


- уменьшение боли после физических нагрузок или хождения в неудобной обуви;
- благоприятное воздействие при отечности и плоскостопии;
- воздействие на рефлекторные точки стопы;
- снятие напряжения мышц;
- разогрев тканей ног и улучшение их эластичности;
- поддержание мышц ног в тонусе;
- разминание мышц, снятие усталости и ощущения затекания;
- улучшение общего самочувствия;
- расслабляющее воздействие;
- уменьшение стресса.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА:

1. Корпус массажера
2. Массажные элементы, закрытые тканевыми чехлами
3. Панель управления
4. Подставки под пятки
5. Лампы ИК-прогрева (для модели 210I)



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

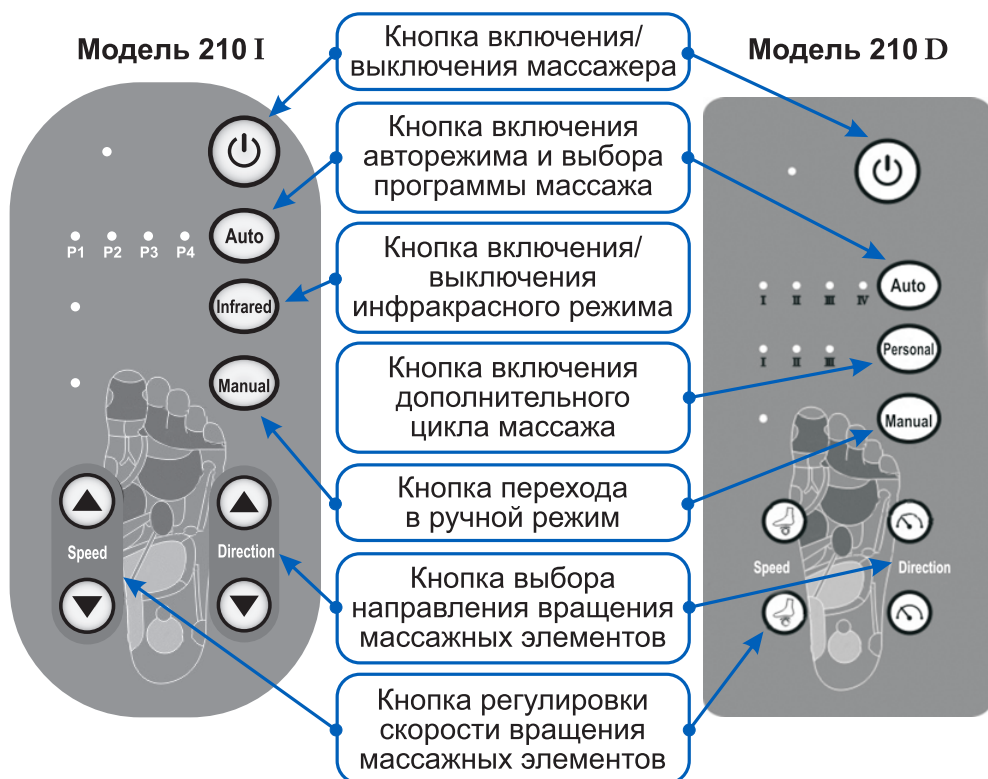


ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:

Все функции панели управления можно выполнять с помощью пульта управления

Кнопка включения/выключения инфракрасного режима для модели **210 I**

Кнопка включения/выключения дополнительного цикла массажа для модели **210 D**

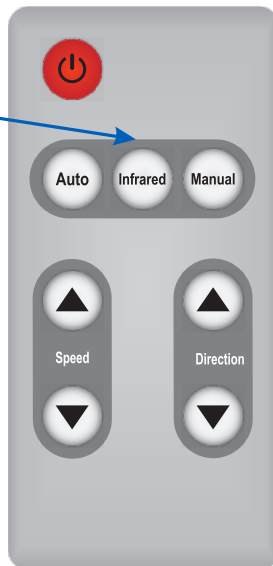

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- напряжение в мышцах;
- усталость ног;
- повышенные физические нагрузки;
- долгое пребывание в стоячем или сидячем положениях;
- хождение в неудобной обуви;
- слабый тонус мышц ног;
- стресс;
- утомляемость;
- повышенная раздражительность;
- бессонница;
- отеки;
- плоскостопие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- психологические заболевания;
- остеопороз;
- лихорадка;
- острые воспалительные и гнойные процессы;
- эпилепсия;
- туберкулез легких;
- злокачественные опухоли (новообразования);
- кровотечения и заболевания крови;
- сердечно-сосудистая недостаточность;
- аритмия, нарушения ритма сердца;
- гипертоническая болезнь;
- наличие кардиостимулятора или иных электроаппаратов на теле;
- беременность;
- алкогольное опьянение;
- наркотическое опьянение;
- индивидуальная непереносимость процедуры.

При наличии каких-либо заболеваний перед применением прибора необходимо проконсультироваться с врачом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный прибор является сложным техническим устройством, пожалуйста, во избежание травмы или поражения электрическим током, соблюдайте меры безопасности во время использования.

Внимание! Запрещается включение прибора без изучения руководства по эксплуатации.

1. Перед началом использования прибора ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
2. Перед началом использования прибора проконсультируйтесь с терапевтом.
3. Используйте массажер только по его прямому назначению, как указано в данном руководстве по эксплуатации.

-
4. Не используйте прибор во время беременности или плохого самочувствия.
 5. Не используйте прибор во время сна.
 6. Не используйте прибор на пораженных участках кожи.
 7. Не допускайте к использованию прибора детей и людей с ограниченными возможностями.
 8. Не используйте прибор в чрезмерно влажных и пыльных условиях, поскольку это может привести к неисправности или поражению электрическим током.
 9. Не используйте прибор в помещении с температурой 40°C или выше.
 10. Не допускайте нагревания массажера от тепловых приборов или попадания на прибор прямых солнечных лучей.
 11. Не используйте прибор в случае повреждения тканевого покрытия.
 12. Не вставляйте посторонние предметы в прибор.
 13. Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся материалов.
 14. Не опускайте прибор в воду и не беритесь за него влажными руками.
 15. Не используйте прибор на открытом воздухе.
 16. В случае попадания жидкости на прибор отключите массажер от сети и обратитесь к специалисту в сервисный центр.
 17. Не накрывайте прибор тканевыми покрытиями или одеждой во время использования, т.к. это может привести к перегреву прибора и возгоранию.
 18. Отключайте прибор от электросети после использования.
 19. Не вскрывайте прибор самостоятельно, это может привести к травме или поражению электрическим током.
 20. Чтобы избежать удара электрическим током, подключайте прибор только в заземленные розетки.
 21. Запрещается доставать вилку из розетки во время работы массажера.
 22. Избегайте повреждения шнура электропитания. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей. Не используйте массажер с поврежденным шнуром.
 23. Если Вы не используете массажер в течение длительного времени, храните его в пыле- и влагонепроницаемом месте.
 24. Немедленно прекратите использование массажера, если обнаружили какую-либо техническую неисправность. Чтобы избежать перегрузки электрической сети, не подключайте к одной розетке одновременно работающий массажер и другие электрические приборы.
 25. Прибор не должен подвергаться давлению, ударам. Избегайте падения прибора.
 26. Для очистки массажера используйте мягкую ткань. Не используйте для очистки растворители и другие агрессивные моющие средства.
-

-
27. Не используйте массажер в коммерческих целях.
 28. В случае поломки прибора обратитесь к специалисту в сервисный центр. Не пытайтесь производить самостоятельный ремонт прибора.
 29. Несоблюдение мер безопасности снимает прибор с гарантийного обслуживания.
 30. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильной эксплуатации.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА

1. Подключите массажер к розетке 220В. После включения прозвучит сигнал и устройство совершит тестовый поворот массажных элементов.
2. Сядьте и займите удобное положение, поместив ступни внутрь массажера.
3. Нажмите кнопку включения на пульте дистанционного управления или на панели управления на самом приборе.
4. По умолчанию массажер начнет работать в режиме первой автоматической программы.
5. Выберите подходящий режим работы в режиме **"Auto"** или **"Manual"**. Во время массажа вы можете плавно смещать ноги на платформах, чтобы получать массаж именно в той области, с которой требуется снять боль, отек, напряжение, ощущение скованности.

РЕЖИМ "AUTO" (АВТОМАТИЧЕСКИЙ):

- Нажатием кнопки **"Auto"** выберите одну из четырех автоматических программ, подходящую вам:

Программа 1: Общий универсальный массаж

Программа 2: Воздействие на точки стопы, связанные с областью поясничного отдела, позвоночника, шеи, плеч и головы.

Программа 3: Воздействие на точки стопы, связанные с печенью и органами желудочно-кишечного тракта.

Программа 4: Воздействие на точки стопы, связанные с репродуктивной и выделительной системами, а также с областью опорно-двигательного аппарата.

-
- Выбранная программа загорится соответствующим индикатором на панели управления.
 - При переключении с одной программы автоматического режима на другую отсчет времени массажа начинается с первой минуты.
 - Кнопка **"Personal"** (персональный режим)* позволяет выбрать необходимый дополнительный цикл:

Цикл I: кончики пальцев

Цикл II: подошвенная дуга (лодыжки)

Цикл III: подошва (ступни).

(*функция персонального режима доступна только в модели массажера D&D 210 D).

РЕЖИМ "MANUAL" (РУЧНОЙ):

- Чтобы перейти в ручной режим управления, нажмите кнопку **"Manual"**.
 - Выберите одну из трех скоростей интенсивности массажа с помощью кнопки **"Speed"**.
 - Выберите направление вращения массажных элементов нажатием кнопки **"Direction"**.
 - При переключении в ручном режиме скорости и направления движения массажных элементов автотаймер продолжит работу с сохранением времени.
6. Если вы хотите, чтобы сеанс массажа сопровождался инфракрасным прогревом, то нажмите кнопку **"Infrared"** (*функция инфракрасного прогрева доступна только в модели массажера D&D 210 I).
 7. Чтобы поставить массажер на паузу, один раз нажмите на кнопку включения. В этом случае индикация на панели прибора продолжит светиться, но массажер приостановит свою работу. Чтобы возобновить работу массажера, еще раз нажмите на кнопку включения. В случае продолжения паузы более 5-ти минут прибор отключится автоматически.
 8. Рекомендуемый сеанс массажа составляет 15 минут. Функция автотаймера приостановит работу прибора по истечении этого времени. Не используйте массажер более 30 минут в день (более двух сеансов 15-минутного массажа).
 9. Для отключения массажера удерживайте кнопку включения/выключения 2-3 секунды.
 10. Отсоедините вилку шнура электропитания от розетки.
-

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина неисправности	Возможный способ устранения неисправности
Массажер не включается	Прибор не подключен к электричеству	Подключите прибор к сети и проверьте надежность контакта вилки в розетке
	Не работает розетка	Убедитесь в работоспособности розетки, подключив другой прибор
	Не нажата кнопка включения	Убедитесь, что вы нажали кнопку включения на панели управления или на пульте ДУ
	Закончились элементы питания пульта ДУ	Замените элементы питания в пульте ДУ
	Аппарат неисправен	Обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта прибора
Массажер выключился во время массажа	Отсоедините шнур питания от электричества	Убедитесь, что шнур питания не был отключен от электрической розетки
	Нажмите кнопку выключения на панели управления	Убедитесь, что кнопка выключения не была нажата случайно
	Истекло время автоматического таймера через 15 минут непрерывной работы прибора	Включите прибор еще раз
	Активация защиты от перегрева прибора	Отключите прибор от розетки и дайте массажеру остыть

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- На настоящий прибор установлен гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи. Гарантийное обслуживание подразумевает под собой бесплатный ремонт изделия или замену на аналогичный прибор в случае невозможности ремонта.
- Бесплатное гарантийное обслуживание осуществляется только в случае соблюдения покупателем правил эксплуатации согласно инструкции пользования прибором.
- Повреждения прибора не должны быть следствием потребительского износа.
- Обязательство по гарантийному обслуживанию оказывает организация, продавшая изделие.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи _____

Серийный номер прибора _____

Информация о фирме-продавце _____

*Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции,
механических повреждений не имеет. Претензий нет.
С условиями гарантийного обслуживания согласен.*

Подпись покупателя _____